


DUNA DENTA & DUNA PRIVAT

Návod na instalaci a převod dat z verze 2025.3

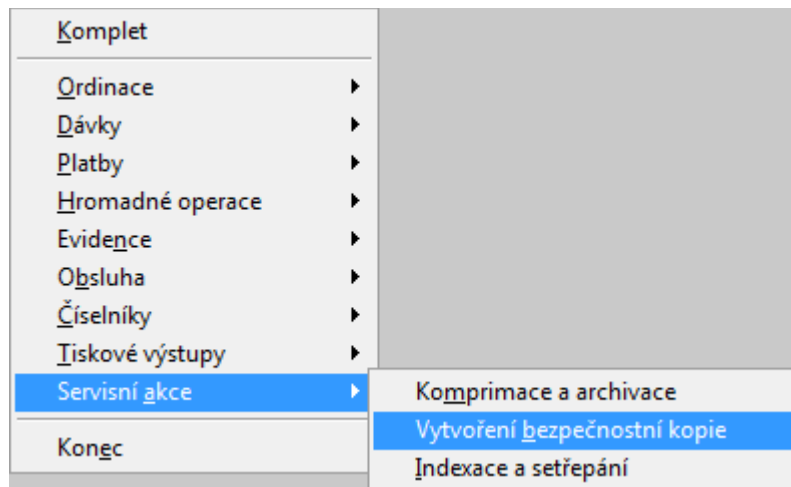

1. **Vytvoření bezpečnostní kopie dat** ve stávající verzi programu – volba v menu *Agendy* -> *Servisní akce* -> *Vytvoření bezpečnostní kopie*. Ukončíte práci v programu, např. tlačítkem *Konec*.

Od této chvíle až do dokončení instalace upgrade **nesmí nikdo zadávat nebo opravovat údaje o Vašich pacientech, výkonech, atd.**, ani z jiného počítače v síti.

2. Instalace upgrade = nová verze programu

- 2.1. kliknete na instalační program, který jste si stáhli z webu a spustíte průvodce instalací,
- 2.2. na obrazovce, popisující průběh instalace, potvrdíte zahájení instalace tlačítkem *Další*, případně ukončíte instalaci tlačítkem *Storno*,
- 2.3. přečtete si Licenční ujednání a souhlas potvrdíte tlačítkem *Další*,
- 2.4. tlačítkem *Instalovat* potom zahájíte vlastní instalaci upgrade systému DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT. Dokončíte stiskem tlačítka *Dokončit*.

Na ploše počítače se vytvoří nová ikona DUNA DENTA nebo DUNA PRIVAT s označením verze systému 2026.1. Spustíte tento program. Čekají vás dva jednoduché kroky, které se provádějí vždy jenom při prvním spuštění upgradované verze programu – aktivace softwarové licence¹ a převod dat z nižší verze programu².


3. **Aktivace softwarové licence** pro rok 2026 – po instalaci produktu a jeho prvním spuštění si aplikace vyžádá vložení *produkčního klíče* pro rok 2026. Tento textový řetězec 25 znaků, např. QWERT-123AS-ZXC45-TYUI8-DFGH5, je k dispozici na naší webové stránce s informacemi o Vašich licencích. Do políčka LOGIN na této stránce zadáte svou e-mailovou adresu, kterou jste uvedli na našem obchodním oddělení pro komunikaci s Vámi a heslo.
4. Pro rychlé provedení aktivace musíte být připojeni k internetu. Po spuštění se Vám zobrazí následující dialog:

¹ Aktivace softwarové licence se ve skutečnosti provádí jenom 1x ročně, a to vždy, když obdržíte první variantu programu pro nový kalendářní rok.

² Nové verze distribuujeme ve formě upgrade nebo update. Převod dat z nižší verze se spouští vždy v případě upgrade, kdy na ploše i vzniká při instalaci nová ikona. Při nové verzi ve formě update nová ikona nevzniká a po instalaci můžete hned pracovat, aniž byste museli data převádět.




Volbou *Ano* vstoupíte do dialogu pro aktivaci produktu.

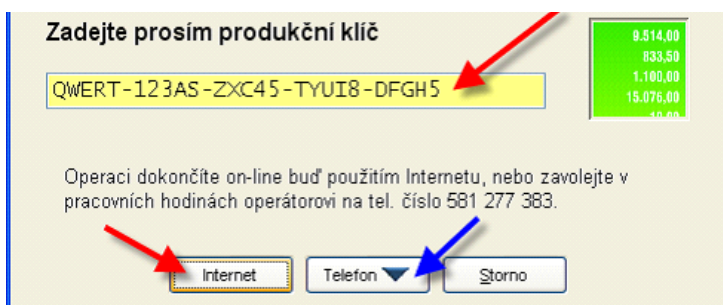

Do zobrazeného pole vložte obdržенý produkční klíč a odstartujete internetovou aktivaci stiskem tlačítka *Internet* ³. Úspěšný výsledek aktivace produktu je ukončen po několika sekundách hlášením.

5. **Převod dat z nižší verze programu** – v dalším dialogovém okně zaškrtněte data, která chcete převést, a program dokončí jejich převod z předcházející verze programu do aktuální verze ⁴.

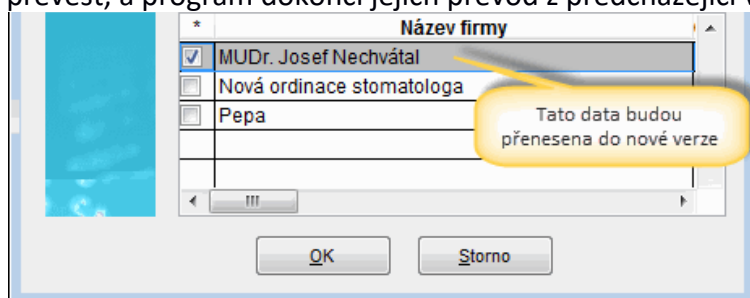

6. Pokud máte **více počítačů v síti**, proveďte nyní instalaci nového programu, popsaného v bodu 2.,

³ Pokud Internet k dispozici nemáte, po stisknutí tlačítka *Telefon*, v obvyklých pracovních hodinách, zavolejte operátorovi na telefonní číslo 581 277 383 a provedete aktivaci softwarové licence dle jeho pokynů.

⁴ Po dokončeném převodu dat nejsou již data přístupná v předcházející verzi programu, tj. nebudou se vůbec zobrazovat v základní nabídce starší verze programu.

na všech ostatních počítačích⁵.

INSTALACE NOVÉ VERZE PROGRAMU JE HOTOVA.

⁵ Aktivace licence a převod dat se provádějí pouze na prvním počítači.